

Installationsanleitung Windows Netzwerk

1. Schritt:

Server Programm Download

Der Download des EPIKUR Programms erfolgt von unserem Kunden Portal:

www.epikur.de/portal


Das Portalpasswort lautet Berlin

Navigieren Sie in den Download Bereich und klicken Sie nun Ihren Link an, um die passende Installationsdatei herunterzuladen. In diesem Fall klicken Sie in der Spalte Windows auf EPIKUR Server.



2. Schritt:

Lizenzabkommen annehmen

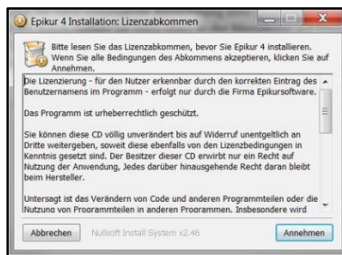

Wenn Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben, starten Sie diese mittels Doppelklick. Durch Klick auf den *Annehmen* Button wird das Lizenzabkommen angenommen und Sie gelangen zum nächsten Schritt.

3. Schritt:


Zielverzeichnis wählen



Das Zielverzeichnis kann von Ihnen angepasst werden, wir empfehlen Ihnen dieses allerdings so zu belassen. Klicken Sie auf *Weiter*.

4. Schritt:


Startmenüordner anlegen

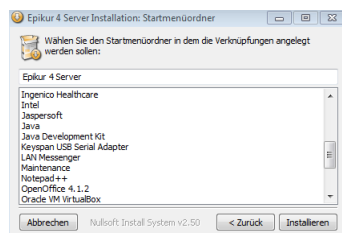

Hier können Sie nun den Namen, welcher in dem Startmenüordner Verwendung finden soll, einstellen. Dieser kann ebenfalls angepasst werden. Klicken Sie auf *Installieren* um die Installation zu starten.

5. Schritt:

Installation

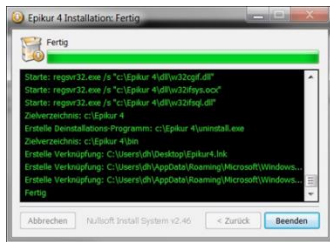


Die Installation läuft nun selbstständig und dauert je nach System und Rechnerleistung bis zu 10 min. Mittels Klick auf den *Beenden* Button kann anschließend die Installation beendet werden.

6. Schritt:


Server starten



Epikur 4 Server

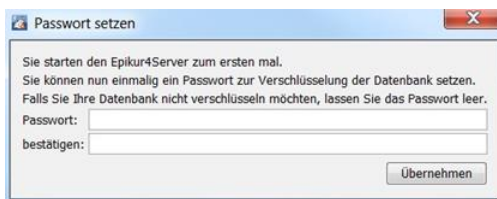

Auf dem Desktop befindet sich nun das Epikur Server Starticon. Führen Sie einen Doppelklick auf das Epikur Server Starticon aus. Anschließend werden Sie aufgefordert ein Passwort für die Datenbankverschlüsselung einzugeben. Die Vergabe eines Passwortes ist nicht erforderlich zum Betrieb von EPIKUR, es dient lediglich einer erweiterten Sicherheit.

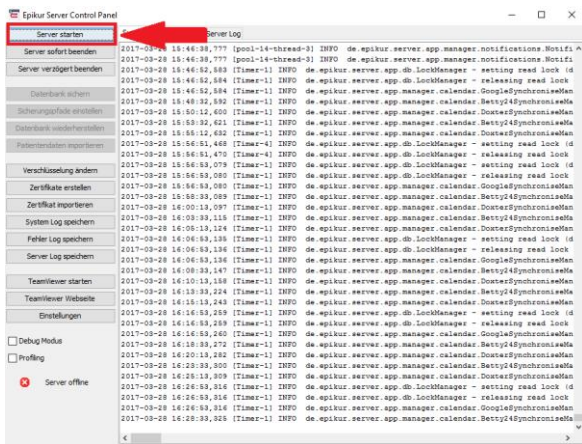

Bitte notieren Sie sich ihr Passwort und bewahren es gut auf. Eine verschlüsselte Datenbank kann bei Verlust des Passwortes von uns nicht entschlüsselt werden!

7. Schritt:

Windows Firewall



Sollte sich die Windowseigene Firewall melden, nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor. Klicken Sie anschließend auf Zugriff zulassen und geben ggf. Ihr Windows Administrator Kennwort ein.

8. Schritt:

Epikur Client Download

Der Download des EPIKUR Programms erfolgt von unserem Kunden Portal:

www.epikur.de/portal

Das Portalpasswort lautet Berlin


Netzwerkvariante



Navigieren Sie in den Download Bereich und klicken Sie nun Ihren Link an, um die passende Installationsdatei herunterzuladen. In diesem Fall klicken Sie in der Spalte Windows auf EPIKUR Client.

9. Schritt:


Lizenzabkommen annehmen

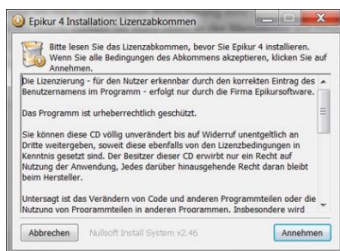

Wenn Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben, starten Sie diese mittels Doppelklick. Durch Klick auf den *Annehmen* Button wird das Lizenzabkommen angenommen und Sie gelangen zum nächsten Schritt.

10. Schritt:


Zielverzeichnis wählen

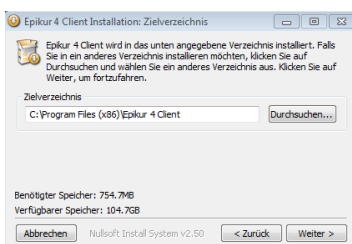

Das Zielverzeichnis kann von Ihnen angepasst werden, wir empfehlen Ihnen dieses allerdings so zu belassen.

11. Schritt:


Startmenüordner anlegen

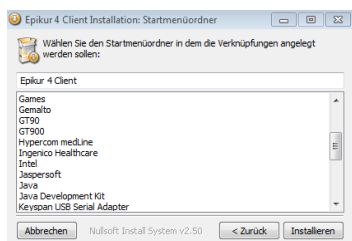

Hier können Sie nun den Namen, welcher in den Startmenüordner Verwendung finden soll, einstellen. Dieser kann ebenfalls angepasst werden. Klicken Sie auf *Installieren* um die Installation zu starten.

12. Schritt:

Installation vom Client

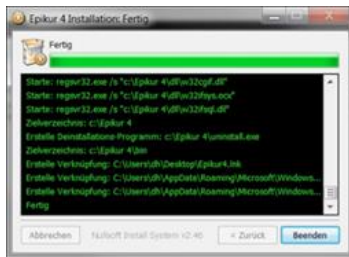

Die Installation läuft nun selbstständig und dauert je nach System und Rechnerleistung bis zu 10 min. Mittels Klick auf den *Beenden* Button kann anschließend die Installation beendet werden.

13. Schritt:

Starten und Anmelden



Auf dem Desktop befindet sich nun das Epikur Start Icon mit dem Sie EPIKUR starten können.

Im Kundenportal finden Sie weitere nützliche Anleitungen zu den nachfolgenden Schritten:

- **Wie hinterlege ich in EPIKUR die Lizenz? (Anleitung und Video)**
- **Wie richte ich Kartenlesegeräte unter Windows und MacOS ein? (Anleitung und Video)**

Wir sind für Sie da

Sollten noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Telefonisch erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter **+49 30 340 601 102**. Oder senden Sie uns eine E-Mail an support@epikur.de.